

**ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА**

„ЭЛИМАН-206“⁶⁶

**(Для индивидуального пользования
в домашних условиях)**

УТВЕРЖДАЮ.

Проректор по НИР
Куйбышевского медицинского
института им. Д. И. Ульянова
В. В. Косарев.

30 марта 1990 г.

Составители: д. м. н., профессор А. С. Дильдин
д. т. н., профессор Л. И. Калакутский.

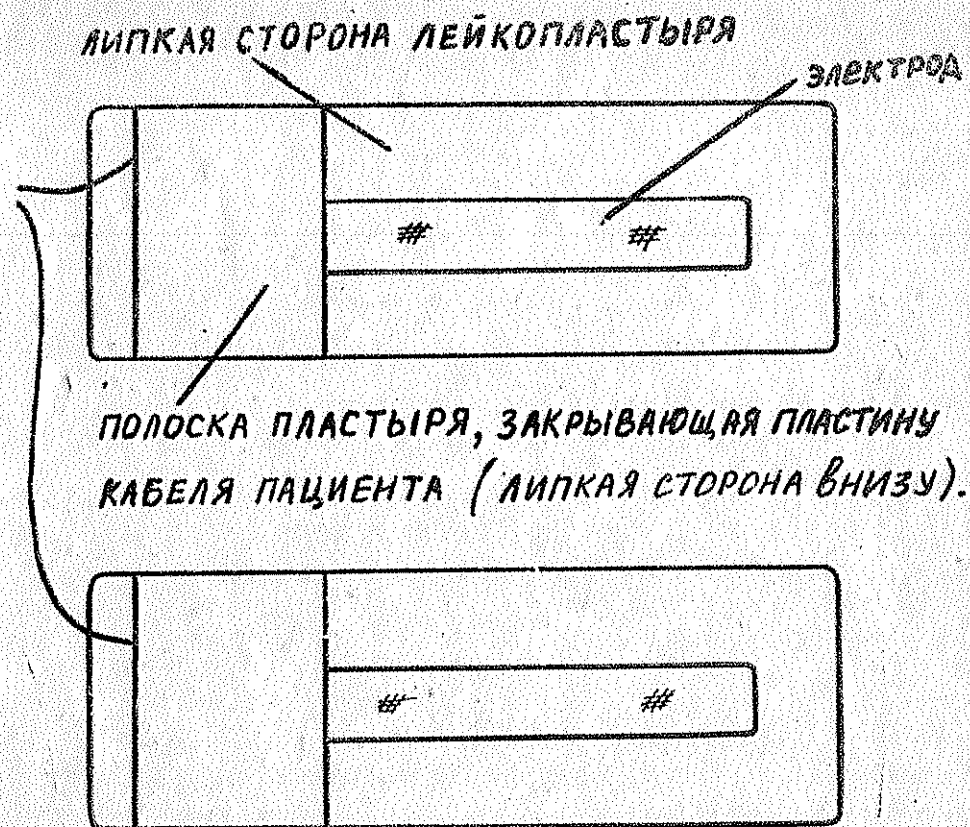


Рис.7. Электроды, подготовленные к закреплению на коже.

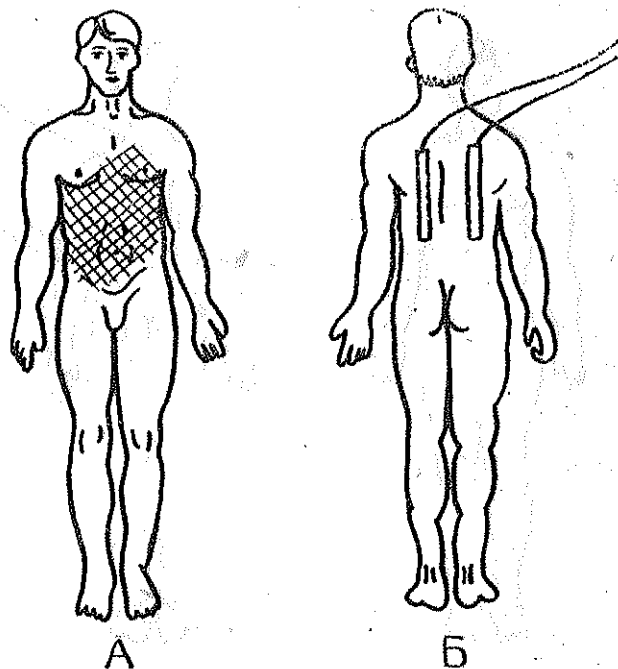


Рис. 6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ (Б) ПРИ МЕЖРЕБЕРНЫХ НЕВРАЛГИЯХ И ОПОЯСЫВАЮЩЕМ ЛИШАЕ (А-ЗОНА БОЛИ ).

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!

Вы приобрели высокоэффективный противоболевой чрескожный электростимулятор «ЭЛИМАН-206».

Напоминаем Вам, что перед его применением в домашних условиях необходимо посетить своего лечащего врача и, после установления диагноза заболевания, получить консультацию по методике пользования аппаратом в полном соответствии с «Инструкцией по применению аппарата» и с настоящим «Дополнением» к ней.

1. Показания к применению аппарата «ЭЛИМАН-206».

Электростимулятор, несомненно, принесет Вам облегчение боли при следующих заболеваниях:

— остеохондроз шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника с корешковым синдромом (радикулиты, невриты);

— острые и хронические воспаления суставов конечностей с выраженными болями;

— опоясывающий лишай с сильными невралгическими болями;

— миозиты;

— фантомные боли после ампутаций конечностей.

При других заболеваниях (опухолевый процесс, заболевания артерий, боли в брюшной полости и др.) лечение необходимо проводить под постоянным контролем лечащего врача.

2. Порядок работы с аппаратом, подготовка электродов, длительность и периодичность сеансов электростимуляции, параметры стимуляции изложены в соответствующих разделах «Инструкции по применению аппарата «ЭЛИМАН-206».

Электроды, подготовленные к закреплению на коже пациента, приведены на рис. 7 настоящего «Дополнения». Поверхность электродов, контактирующая с кожей, обрабатывается электропроводящей пастой, в качестве которой в комплект прибора входит линимент синтомицина. Для этой цели может быть использован и любой увлажняющий крем, например, «Силиконовый».

Успех лечения и противоболевая эффективность во многом зависят от правильного расположения электродов в зависимости от источника боли.

Для большего удобства, для упрощения пользования аппаратом и с целью наглядности дополнительно к таблице 1 «Инструкции» в настоящем «Дополнении» приведена серия рисунков (рис. 1—рис. 6), иллюстрирующих наиболее целесообразные места расположения электродов в зависимости от заболевания, вызвавшего боли.

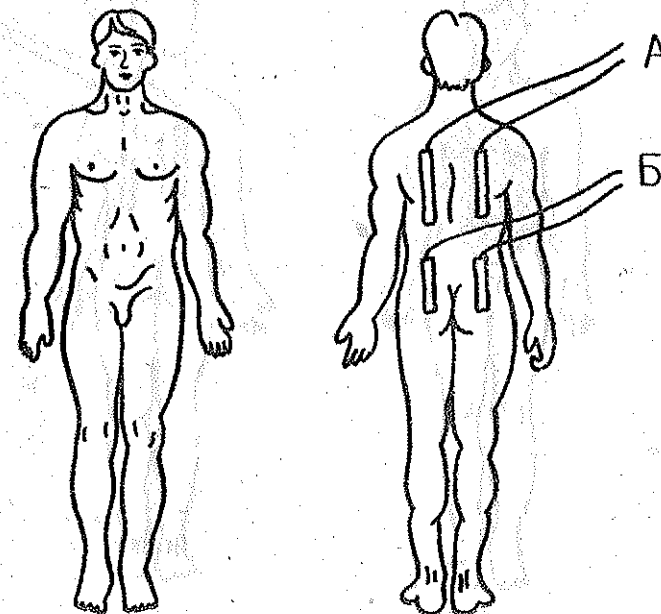


Рис. 5. Расположение электродов при грудном радикулите (А) и при пояснично-крестцовом радикулите (Б).

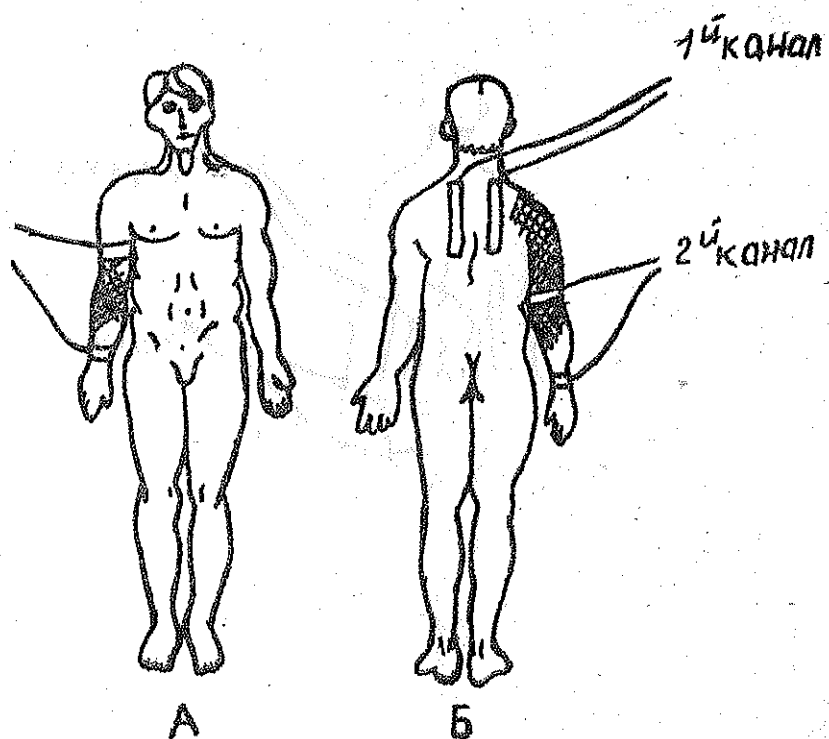


Рис.4. Расположение электродов при болях: А-в локтевом суставе, Б-при плече-лопаточном периартрите (X-зона боли).

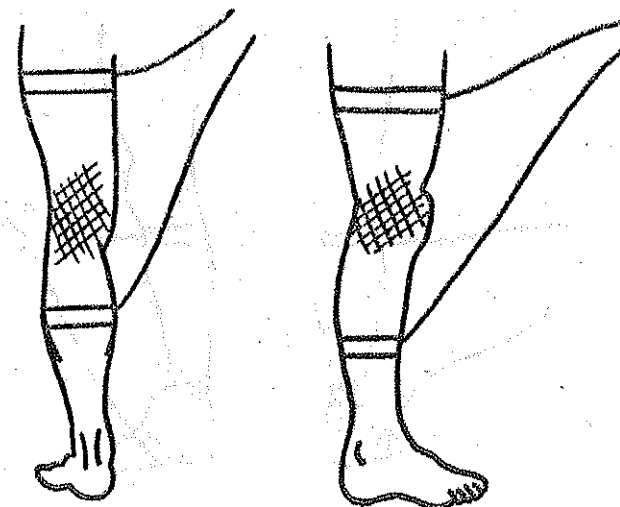


Рис.1. Расположение электродов при болях в коленном суставе (X-зона болей).

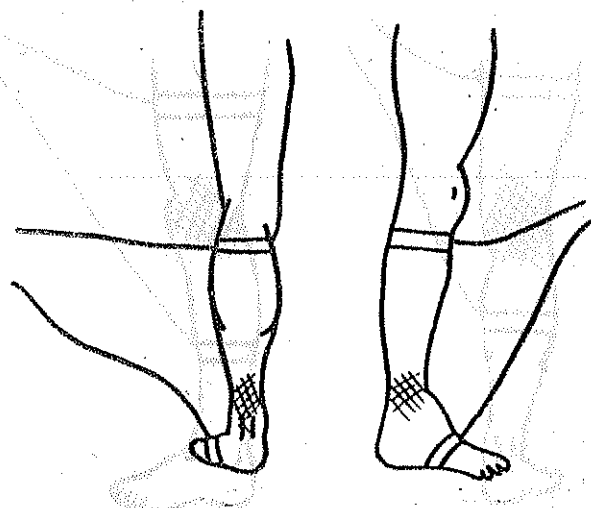


Рис.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
ПРИ БОЛИ В ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ
(■ - ЗОНА БОЛИ).

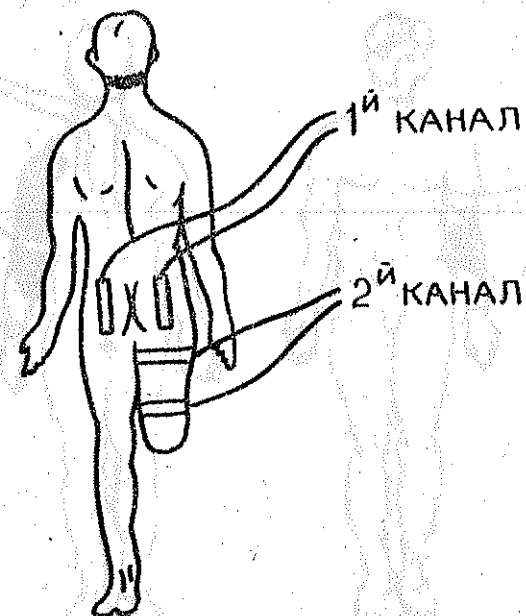


Рис.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
ПРИ БОЛЯХ В АМПУТАЦИОННОЙ
КУЛЬТЕ.